


## **Analizzatore di umidità HE73 71g 1mg a lampada alogena METTLER TOLEDO**

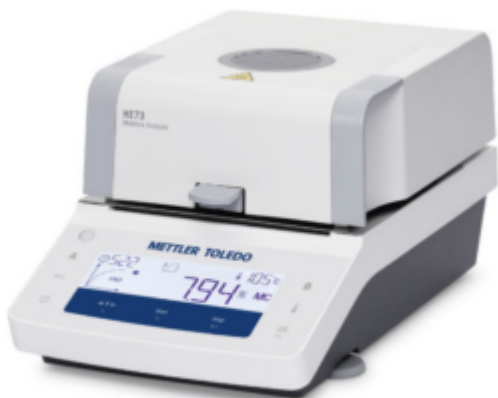

**Codice Articolo:** 30237200

### **Breve descrizione del prodotto:**

Analizzatore di umidità HE73 71 g 1 mg a lampada alogena METTLER TOLEDO

### **Informazioni aggiuntive:**

- Incrementi di temperatura: 1 °C
- Flessibilità applicativa: Bassa
- Modalità di visualizzazione: % AM, % AD, % DC, % MC, g
- Ripetibilità (sd) con campione da 2 g: 0,15 %
- Ripetibilità (sd) con campione da 10 g: 0,05 %
- Risoluzione MC: 0,01 %
- Archiviazione dei metodi (max.): 2
- Lingue: Inglese
- Test e regolazione: Peso, Temperatura (100 °C/160 °C), SmartCal
- Temperatura di essiccazione: 50 °C - 200 °C
- Interfacce: RS232
- Industriale: Altri | Settore alimentare
- Archiviazione dei risultati: 1
- Criteri di spegnimento: A tempo, Automatico 1 (SOC 3), Liberamente definibile (1 mg/10-140 s)

- Gestione dei risultati: Stampa su nastro
- Tensione: 230 V
- Portata (g): 71 g
- Programmi di essiccamento: Rapido | Standard
- Intervallo minimo di umidità consigliato (% MC): 1

## Descrizione

L'analizzatore di umidità alogeno **HE73** è uno strumento intuitivo che determina in modo attendibile il contenuto di umidità nei campioni esaminati ogni giorno.

Grazie alle istruzioni su schermo, alla semplice procedura in 3 passaggi e ai due metodi memorizzati, la determinazione del contenuto di umidità diventa un'operazione rapida ed efficiente anche in assenza di operatori specializzati.

Questo strumento ha un costo contenuto e assicura un elevato ritorno sull'investimento, in quanto integra una tecnologia di pesata affidabile e un modulo di riscaldamento alogeno dalle prestazioni accurate.

Altri vantaggi del sistema HE73:

- Modalità di avvio automatica e manuale
- Data e ora integrate
- Criterio di spegnimento personalizzabile
- Verifica con SmartCal integrata
- Connessione semplificata alle stampanti

## Caratteristiche

- Display chiaro e luminoso

Grazie ai numeri grandi e al display LCD luminoso, le informazioni e i risultati sono ben visibili con qualsiasi tipo di illuminazione ambientale.

- Utilizzo semplice in 3 passaggi

Chiunque può eseguire subito l'analisi del contenuto di umidità:

1. Tarare il piatto di pesata vuoto
2. Distribuire il campione in modo uniforme
3. Chiudere il coperchio e premere il pulsante di avvio per ottenere i risultati in pochi minuti






- Qualità e convenienza

Il sistema HE73 è dotato di tecnologia di essiccazione alogena e di un'unità di pesata ad elevate prestazioni che assicurano un ottimo rapporto qualità/ prezzo. Grazie al design robusto e facile da pulire, con alloggiamento in metallo e superficie in acciaio inossidabile, il sistema HE73 garantisce anni di prestazioni affidabili.

- Selezione rapida del metodo

Il sistema HE73 dispone di due pulsanti che consentono di scegliere rapidamente i parametri desiderati da una serie predefinita e assicurano l'utilizzo del metodo ideale per l'essiccazione dei campioni.

## Download

<b>Brochure</b>

<b>Manuali</b>



<b>Dichiarazione di conformità</b>


- Per la Bilancia sono disponibili i seguenti **Accessori**