

## **Forno a muffola 1100°C L9/11/B510 c/porta ribaltabile (L-095K1AL) NABERTHERM**



**Codice Articolo:** 22.A001.09

### **Breve descrizione del prodotto:**

Forno a muffola 1100°C L9/11/B510 con porta ribaltabile NABERTHERM

### **Informazioni aggiuntive:**


- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 480x550x570
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 230x240x170
- Peso (kg): 45
- Range temperatura (° C): 1050
- Temperatura massima (° C): 1100
- Volume (l): 9
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50-60/-



### **Descrizione**

I forni a muffola L 3/11 - LT 60/12 sono stati testati per l'uso quotidiano in laboratorio. Questi modelli si distinguono per la loro eccellente fattura, il design avanzato e accattivante e l'alto livello di affidabilità. I forni a muffola sono dotati di una porta a ribaltabile




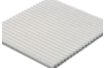
oppure sollevabile senza costi aggiuntivi.

- Tmax 1100 °C o 1200 °C
  - Riscaldamento da due lati con piastre riscaldanti in ceramica (riscaldamento da tre lati nei forni a muffola L 24/11 - LT 60/12) offre un'ottimale uniformità della temperatura
  - Termocoppia di tipo N (1100 °C) o di tipo S (1200 °C)
  - Piastre riscaldanti in ceramica per resistenze elettriche a filo integrato, protezione e facili da sostituire
  - A scelta con porta ribaltabile (L), che può fungere da piano di lavoro, o senza costi aggiuntivi ad apertura parallela (LT), in modo che il lato caldo si allontani dall'operatore
  - Apertura regolabile per la presa d'aria nella porta (vedi figura)
  - Apertura per l'aria di scarico sulla parete posteriore del forno
  - Controller B510 (5 programmi da 4 segmenti ciascuno) o R7 per L 1/12, per controller alternativi vedi pagina 8
- 
- Camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore (non per L 1 e L 15) vedi pagina 26
  - Limitatore di sovra temperatura con temperatura di spegnimento regolabile su una temperatura limite per proteggere il forno e la carica
  - Allacciamento gas inerte per il lavaggio del forno con gas inerti o di reazione non infiammabili (non disponibile in combinazione con camino di scarico, camino di scarico con ventilatore o catalizzatore), non a tenuta di gas
  - Sistema di gasaggio manuale o automatico
  - Passaggio per termocoppia nella parete posteriore o nella porta del forno
  - Telai di caricamento con vassoi chiusi o forati per la carica del forno su più livelli incl. supporto per l'inserimento / rimuovere i vassoi fino a max. temperatura di 800 °C e max. peso di carico per ogni livello di 2 kg per L(T) 9/11 e 3 kg per L(T) 15/11 vedi pagina 23
  - Forno a muffola L 3/11 con porta ribaltabile · Per ulteriori accessori vedi pagina 27

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.A001.07</a>	Forno a muffola 1100°C L3/11/B510 c/porta ribaltabile (L-035K1AL) NABERTHERM

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.A001.08</a>	Forno a muffola 1100°C L5/11/B510 c/porta ribaltabile (L-055K1AL) NABERTHERM
	<a href="#">22.A001.10</a>	Forno a muffola 1100°C L15/11/B510 c/porta ribaltabile (L-155K1AL) NABERTHERM

## Accessori

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.9397.99</a>	Piastra scanalata in ceramica Tmax 1200° x L9/LT9/LV9/LVT9/N7 (691600509) NABERTHERM
	<a href="#">23.8844.99</a>	Camino di scarico con ventilatore (6000140311) NABERTHERM
	<a href="#">23.8843.99</a>	Camino di scarico (631000140) NABERTHERM
	<a href="#">691600512</a>	Vasca di raccolta in ceramica Tmax 1300° x L9/LT9/LV9/LVT9/N7 NABERTHERM

## Download

<b>Brochure</b>
