


REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 55/45 250 ML



L'estrattore di Soxhlet viene usato nella determinazione dei grassi liberi e totali negli alimenti, analisi dei pesticidi, dei legni e delle plastiche. L'estrazione avviene riscaldando il solvente contenuto nel matraccio, dopo che il campione è stato posto nel ditale filtrante nell'interno dell'estrattore. I vapori sviluppati dal calore salgono lungo il tubo laterale, entrano nel corpo centrale per poi salire nel refrigerante. Nel refrigerante si condensano e ricadono allo stato liquido nel ditale, riempiendo mano a mano l'estrattore fino al livello del sifone, il quale a sua volta scaricherà il liquido nel matraccio.



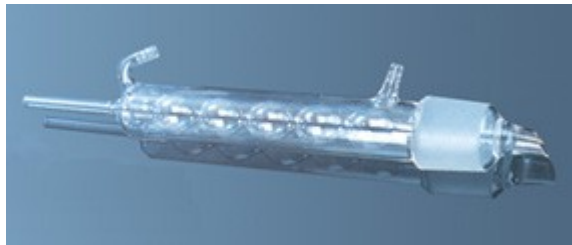

Codice Articolo: 01.0875.73




Breve descrizione del prodotto:

REFRIGERANTI A BOLLE PER SOXHLET, ML 250, CONO MASCHIO NS 55/45

Informazioni aggiuntive:

- Capacità (ml): 250
- Cono (NS): 55/45

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.0875.38	REFRIGERANTE PER SOXHLET 30 ML
	01.0875.51	REFRIGERANTE PER SOXHLET 70 ML
	01.0875.57	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 45/40 100 ML
	01.0875.64	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 45/40 150 ML

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.0875.79	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 60/46 500 ML
	01.0875.88	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 71/51 1 LT
	01.0875.69	REFRIGERANTE PER SOXHLET NS 55/45 200 ML